

...que de bonnes expériences!

„Dernièrement j`ai laissé installer un élévateur UNO de model UNO dans ma salle de bain. Enfin, je suis de nouveau indépendant et capable de me baigner seul aussi longtemps que je veux. J`ai plus besoin de l`aide pour mon soin quotidien.”

„ Je peux utiliser tout seul l`élévateur hydraulique.”



„Je suis dans une chaise roulante parce que je peux plus bouger mes jambes. Grâce à mon élévateur DUO je peux



enfin me baigner.

Ma femme peut le fonctionner facilement pour moi.”

„Je suis depuis un an handicapé, j`ai eu peur de changer mon domicile.

Heureusement j`ai pris l`élévateur UNO comme solution parce que on peut l`installer pratiquement dans n`importe quelle salle de bains. L`élévateur a été installé en seulement 1,75 heures. Alors je peux continuer à vivre dans ma maison.”



„ L`élévateur hydraulique de papa ne nous dérange pas du tout en se baignant et en jouant dans la baignoire.”



Vous êtes intéressés en un de nos modèles d`élévateurs hydrauliques Voici ce que vous reste à faire !

La consultation – individuelle et circonstanciée

Si vous le désirez, nous venons nous-même chez vous pour vous donner des conseils circonstanciés à propos des deux modèles – ainsi vous n`avez aucun chemin à faire. Au cas où votre choix tombe sur un des deux modèles, nous vous proposons de mesurer sur place les dimensions de votre salle de bain. Ensemble nous pourrions commencer directement avec le planning.



Le paiement – facile et sûr

Nous vous conseillons si vous avez des questions concernant la prise en charge du paiement par votre assurance maladie ou encore si vous êtes intéressés en une de nos offres de crédit.



Le montage – rapide et approfondie

Une fois que vous avez choisi un de nos modèles, le service sera rapide. Nous nous accorderons avec vous sur un rendez-vous pour qu`un de nos ajusteurs mécaniciens puisse installer l`élévateur dans votre salle de bain. Le montage n`est pas compliqué et durera au total environ 2 heures seulement. Bien entendu notre ajusteur mécanicien vous expliquera le fonctionnement de l`élévateur hydraulique et quittera votre salle de bain dans un état propre.



schwenklift



...regagner le plaisir de la baignade

Votre contact local:

[Empty box for local contact information]

TRUSS
INNOVA TRADING

TRUSS INNOVA TRADING GmbH
Franzgraben 6-8
D-34125 Kassel
Allemagne

Tel. 0049 561 8075555
Fax: 0049 561 8075741

www.schwenklift.net
info@schwenklift.net

UNO

DUO

...regagner le plaisir de la baignade

UNO

...plus d'indépendance pendant la baignade

DUO

...l'aide pratique pour le personnel infirmier

L'aide pratique pour les personnes âgées

Avec l'âge il est de moins en moins évident d'entrer dans la baignoire à cause d'une agilité restreinte et la peur accrue d'un « accident de bain ».

Grâce à l'élévateur hydraulique vous regagner une partie de votre indépendance et le plaisir de vous détendre lors d'un bain.



Aide pratique pour le personnel infirmier

En cas d'une paraplégie, d'un accident vasculaire cérébral, d'une sclérose en plaques, d'amputations ou bien d'une spasticité – selon les attestations médicales les modèles d'élévateur hydraulique sont recommandés aux personnes ayant les aspects de maladie suivants :

- inaptitude à marcher ou/et à se tenir debout
- difficultés à se tenir sur une jambe
- défauts de muscles/ d'articulations qui ne permettent de relever une jambe pour dépasser le bord d'une baignoire



Informations supplémentaires

Les élévateurs hydrauliques peuvent à tout moment être installés dans votre salle de bain. Ils sont adaptés pour tout type de baignoire. Il n'est donc pas forcément nécessaire de rénover ou de reconstruire la salle de bain.

Aucun danger d'électricité près de la baignoire – les modèles d'élévateurs fonctionnent tous grâce à la pression de l'eau.

En ce qui concerne l'ordonnance et la prise en charge d'un élévateur hydraulique, veuillez consulter votre médecin ou bien adressez-vous à votre assurance médicale en indiquant le numéro ci-dessous.

...enfin se baigner à nouveau seul avec l'UNO!

Regagnez votre indépendance! Le modèle UNO a été développé pour l'usage individuel du client à son domicile. Grâce à un maniement simple et facile vous ne dépendez de l'aide d'aucune autre personne lors de la baignade. Pour se convaincre de la sûreté et de la facilité de UNO, essayez-le vous-même!



Soulèvement et pivotement confortable dans la baignoire.



Plus sûre et plus de confort grâce aux sièges et ceinture de sécurité.



Conversion facile pour élever et abaisser le siège par l'exploitation du levier.



Abaissement lent dans la baignoire sans effort.



Toutes les fonctions de l'élévateur sont sans effort physique.




Abaisée à environ 3 cm au-dessus du fond de la baignoire, le plaisir est garanti.



Équipement UNO

- Bras de commande et bras de rotation
- Poutre rigide
- Siège avec un coussin et une ceinture de sécurité
- Pied selon votre choix : en forme

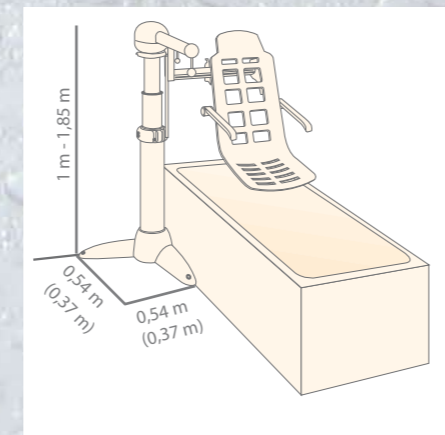

Les dimensions entre parenthèses sont pour économiser l'espace du pieds.

Les points de montage de votre élévateur sont presque illimités.

Une aide pour vous et pour le personnel infirmier – le DUO

Le modèle DUO a été développé exprès pour l'usage à l'aide d'une personne supplémentaire, afin de vous faciliter énormément de prendre un bain, ainsi qu'à votre personnel infirmier. Comme les autres modèles d'élévateur, le DUO se caractérise par un grand confort et un simple maniement. Une charnière dans la poutre augmente le mouvement horizontal du siège, ceci diminue le rayon de pivotement et ainsi l'élévateur occupe le moins d'espace dans votre salle de bain.

Testez le confort du modèle DUO

Prenez place sur le siège fixe et confortable.



Simple usage de la ceinture par le velcro.



Abaissement bien sécurisé par la ceinture pour éviter de glisser.

Pivotement facile dans la baignoire pas les assistants.



Bien sécurisé la baignade peut commencer.



Soulèvement sans effort par une commande à distance.



Équipement DUO

- Maniement avec câble flexible
- Poutre avec charnière
- Prolongement du support de siège
- Siège avec coussin et ceinture de sécurité
- Pied selon votre choix : en forme d'une plaque ou bien en forme triangulaire



Adapté à l'usage avec tout type et toutes formes de baignoire. Également adapté à l'usage dans une baignoire avec une douche.

Utilisation optimale de la baignoire.

Cependant tous les membres de la famille peuvent aussi utiliser l'élévateur.

Jusqu'à la taille d'environ 1,85 m.

Inclus dans la livraison:

- Mode d'emploi
- Instructions de montage
- Pile rechargeable avec appareil de recharge
- Pièces pour le montage et le raccordement de l'eau
- Coussin et ceinture de sécurité

Données techniques:

Hauteur d'élévation 95 cm
Capacité de soulèvement 130 Kg

Raccordement de l'eau existant:

Pression en bar	capacité de soulèvement en kg
2,0	= 70
2,5	= 90
3,5	= 120
3,2	= 130

Poids total: environ 80 kg

Le confort du siège:

- Régulation continue de l'inclinaison
- Accoudoirs pliables
- Ceinture de sécurité et coussin sont inclus dans la livraison

Matériel : aluminium

Largeur : 39 cm (avec accoudoirs: 47 cm)

Hauteur : 70 cm

Poids : 10,5 Kg




DVGW
Zertifikat



Made in Germany

Les points de montage de votre élévateur sont presque illimités.

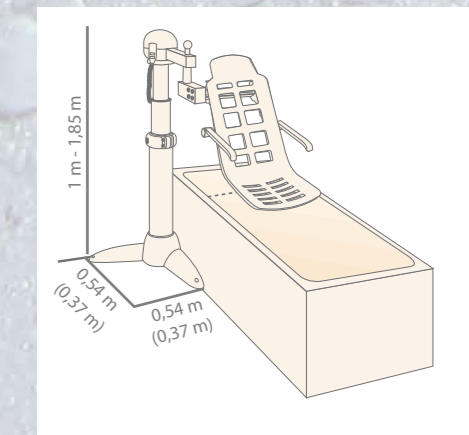

Les dimensions entre parenthèses sont pour économiser l'espace du pieds.